



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

CM-BT2

Bluetooth halsteleslynge



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge.

Tillykke med din nye CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge.

Æsken indholder:


- 1 stk. CM-BT2 Halsteleslynge
- 1 stk. 12V lader
- 1 stk. USB ladekabel
- 1 stk. Strømforsyning
- 1 stk. Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Generel information	4
Bluetooth teknologi	4
Indledende betjening	5
Beskrivelse af betjeningselementerne	5
Opladning af CM-BT2	6
Opladning af CM-BT2 med strømforsyning	6
Opladning af CM-BT2 med 12V plug-in lader	6
Opladning af CM-BT2 via USB port på computeren	6
CM-BT2 brugstid	6
Tænd og sluk for CM-BT2	7
Parring af CM-BT2 med en kompatibel telefon	7
Frakobling af CM-BT2 fra telefonen	8
Reetablér CM-BT2 kontakten til telefonen	9
Grundlæggende betjening	10
Besvar opkald	10
Anvendelse af CM-BT2 til musik sammen med telefonen	10
Justering af styrken	10
Parring af CM-BT2 med en kompatibel computer	11
Halsslyngens sikkerhedslås	11
Generelt	12
Sikkerhed	12
Vedligeholdelse	12
Miljø	13
Specifikationer	13
Garanti	15

Indledende betjening

Beskrivelse af betjeningselementerne

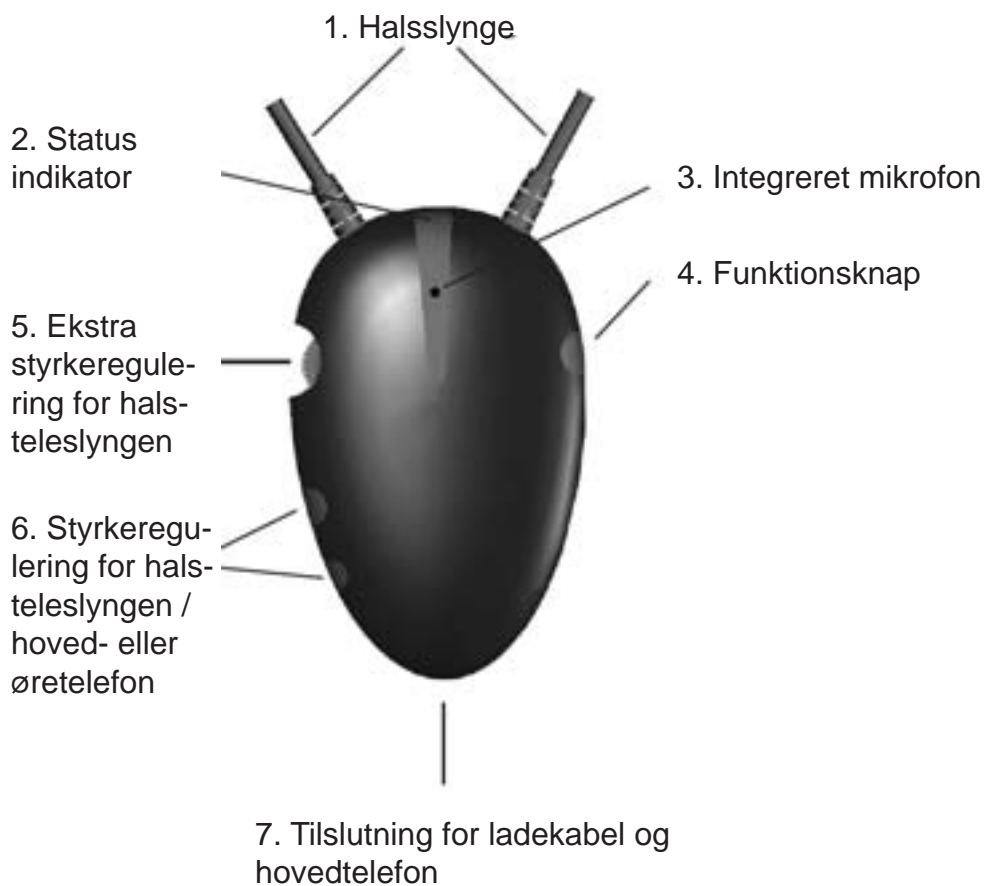

Indledende betjening

1. Hals Slynge

2. Statusindikator

- Rødt lys tændt → CM-BT2 er slukket
- Rødt lys blinker → Advarsel: lav batterispænding
langsomt
- Blåt/rødt lys blink- → Parringsmode
er skiftevis
- Blåt lys blinker → Forsøger parring
hvert 3. sekund
- Blåt lys synligt → Forbindelse opnået med
1 sekund hvert fremmed enhed
5. sekund

3. Integreret mikrofon

4. Funktionsknap

Tænder og slukker for CM-BT2
Samtale svar- og afbryd samtale knap
Parringsknap

5. Ekstra styrkeregulering for halsteleslyngen

Styrken i halsteleslyngen kan justeres uafhængigt med denne knap.

6. Styrkeregulering for halsteleslyngen/hoved- eller øretelefon

Styrken i halsteleslyngen/hovedtelefonen kan justeres med begge disse knapper.

7. Tilslutning for ladekabel og hovedtelefon

Dette 3,5mm stik anvendes til at tilslutte hovedtelefon eller ladestik til CM-BT2.

Indledende betjening

Opladning af CM-BT2

CM-BT2 har et indbygget, genopladeligt lithium polymer batteri. Forud for 1. anvendelse, skal batteriet oplades helt.

Bemærk: CM-BT2 kan ikke anvendes under opladning.

Opladning af CM-BT2 med strømforsyning

Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).

Tilslut den anden ende af kablet til strømforsyningen.

Sæt strømforsyningen i stikkontakten (230V).

CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.



Opladning af CM-BT2 med 12V plug-in lader

Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).

Tilslut den anden ende af kablet til cigartænderstikket.

Sæt cigartænderstikket i cigartænderen.

CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.



Opladning af CM-BT2 via USB port på computeren

Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).

Tilslut den anden ende af kablet til en USB port på din computer.

CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.

CM-BT2 brugstid

Ved normal anvendelse har CM-BT2 3 timers tale tid og op til 120 timers stand-by tid.

Indledende betjening

Når batterier skal genoplades vil den røde status indikator blinke langsomt.

Bemærk: Brugstiden er afhængig af den måde CM-BT2 anvendes på, og hvor stor styrke, der anvendes. Opladningstiden er længere, hvis CM-BT2 ikke har været anvendt i lang tid, og batteriet er helt afladet.3s

Tænd og sluk for CM-BT2



Tryk på funktionsknappen (4) i ca. 3 sekunder til den blå status lampe lyser. Halsteleslyngen/hoved telefonen afgiver en lyd for at indikere, at CM-BT2 nu er tændt. Hvis der er en parret enhed i nærheden vil CM-BT2 automatisk forbinde sig til enheden. For at slukke, tryk funktionsknappen (4) i ca. 3 sekunder til den røde statuslampe lyser. Halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at CM-BT2 nu er slukket.

Parring af CM-BT2 med en kompatibel telefon

Før du kan anvende CM-BT2 med en telefon, skal den tilføjes i telefonens forbindelsesliste. Dette gøres ved at følge instruktionen i telefonens brugervejledning, der forklarer, hvordan Bluetooth aktiveres.

1. Tænd for telefonen



2. Tryk på funktionsknappen (4) på CM-BT2 i ca. 6 sekunder til blå og rød statusindikator blinker skiftevis. CM-BT2 for bliver i parrings mode i 2 minutter.

3. Aktivér Bluetooth funktionen på telefonen for at begynde søgningen efter Bluetooth enheden (CM-BT2).

Se telefonens brugervejledning.

Indledende betjening

4. Vælg CM-BT2 fra den liste, der vises i telefonen. Hvis det er nødvendigt kan password "0000" tages for at parre CM-BT2 og telefonen, og dermed etablere forbindelse.
5. Hvis parringen er succesfuld vil den blå statusindikator på CM-BT2 blinke hurtigt 4 gange og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd.

Med visse telefoner kan det være nødvendigt at foretag forbindelsen manuelt, når CM-BT2 er blevet registreret.

For yderligere information, se telefonens brugervejledning. Det er kun nødvendigt at registrere CM-BT2 én gang, hvorefter CM-BT2 genkendes automatisk.

CM-BT2 er forbundet til telefonen, når den blå statusindikator lyser 1 sekund hvert 5. sekund.

CM-BT2 vil nu optræde i telefonens menu, som viser alle de enheder, der er parrede med telefonen.

Frakobling af CM-BT2 fra telefonen

Anvend én af følgende metoder til at afbryde forbindelsen mellem telefon og CM-BT2, f.eks. hvis du ønsker at forbinde en anden enhed til telefonen:

- Sluk CM-BT2
- Afbryd forbindelsen til CM-BT2 i telefonens Bluetooth menu.
- Flyt CM-BT2 til en position mere end 10 meter fra telefonen.

Bemærk: Du behøver ikke at slette CM-BT2 fra telefonens liste over kompatible enheder for at afbryde forbindelsen.

Indledende betjening

Reetablér CM-BT2 kontakten til telefonen

Den blå statusindikator blinker langsomt, så snart CM-BT2 forbindelsen afbrydes, f.eks. hvis afstanden til telefonen bliver for stor.

Så snart CM-BT2 og telefonen igen er indenfor hinandens rækkevidde genskabes forbindelsen automatisk eller kan forbindes ved at trykke én gang på funktionsknappen. Den blå statusindikator lyser 1 sekund hvert 5. sekund, og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at forbindelsen nu er reetableret.

Grundlæggende betjening

Besvar opkald

For at foretage et opkald skal du sikre dig, at CM-BT2 er forbundet til din telefon. Foretag opkald som normalt.

For at foretage et opkald, tryk funktionsknappen (4) let.

For at afslutte et opkald, anvend knappen på telefonen eller funktionsknappen på CM-BT2.

Anvendelse af CM-BT2 til musik sammen med telefonen

Har du musikafspiller integreret i din telefon, kan du også anvende din CM-BT2 til at aflytte musik. Så snart en indgående samtale registreres, vil musikken automatisk blive afbrudt, og CM-BT2 vil ringe, og du kan trykke funktionsknappen (4) for at besvare opkaldet. Musikken fortsætter med at spille, når samtalen afbrydes.

Justering af styrken



Tryk "+" knappen (6) gentagne gange for at øge styrken.

Halsteleslyngen/hovedtelefonen giver en lyd, når maksimum styrke er nået.

Tryk "-" knappen (6) gentagne gange for at mindske styrken.

Halsteleslyngen/hovedtelefonen giver en lyd, når minimum styrke er nået.



CM-BT2 har en ekstra styrkekontrol (5) til at øge styrken i halsteleslyngen uafhængigt. Drej styrkeknappen på den ekstra styrkekontrol for at justere styrken. Den ekstra styrkekontrol fungerer kun til halsteleslyngen og har således ingen indflydelse på styrken til hovedtelefonen.

Bemærk: Før anvendelsen af CM-BT2, så sørg for at styrken er indstillet til en komfortabel styrke for at undgå støjskade forårsaget af en for kraftig lydstyrke. Sæt altid styrken til en lav styrke.

Grundlæggende betjening

Parring af CM-BT2 med en kompatibel computer

- 1 Tænd for din computer og sørg for, at Bluetooth hardwaren på computeren er aktiveret. Tænd for CM-BT2.
- 2 Tryk funktionsknappen (4) på CM-BT2 i ca. 6 sekunder til det blå og røde lys skiftevis blinker. CM-BT2 forbliver i parringsmode i 2 minutter.
- 3 Kør Bluetooth softwaren på computeren. Følg softwareinstruktionen for at forbinde CM-BT2
- 4 Vælg CM-BT2 fra den liste over enheder, der vises. Hvis det er nødvendigt kan password "0000" tastes for at parre CM-BT2 og computeren, og dermed etablere forbindelse.
- 5 Hvis parringen er succesfuld vil den blå statusindikator på CM-BT2 blinke hurtigt 4 gange og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd.

Vi beklager, at vi ikke er i stand til at yde telefonsupport for problemer, der måtte opstå i forbindelse med dit brug af CM-BT2 sammen med din computer.

Halsslyngens sikkerhedslås



Vær sikker på, at sikkerhedslukningen på halsteleslyngen er helt lukket, for at sikre, at den fungerer korrekt.

Generelt

Sikkerhed

CM-BT2 er udviklet med anvendelse af state-of-the-art teknologi og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter.

Bemærk venligst de følgende sikkerhedsinstrukser:

Udsæt aldrig enheden for:

Varmekilder

Direkte sollys

Fugt og damp

Beskyt enheden mod kontakt med vand, støv, skrappe væsker og damp.

Isæt kun tilslutningsledninger i de korresponderende kontakter.

Tilslut kun godkendt tilbehør.

Ingen ændringer hverken af teknisk eller ikke teknisk art er tilladt.

CM-BT2 kommunikationssystemet indeholder små dele, som let kan sluges. Disse skal holdes uden for rækkevidde for børn under 3 år.

Producenten eller leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for skader eller ulykker forårsaget af ukorrekt anvendelse eller misbrug af produktet.

Vedligeholdelse

CM-BT2 halsteleslyngen kræver ikke vedligeholdelse. Hvis enheden bliver snavset, aftør den med en letfugt, blød klud. Anvend aldrig sprit, fortynder eller andre opløsningsmidler.

Placér ikke CM-BT2 på steder, hvor enheden udsættes for fuldt sollys i længere tid.

Herudover skal enheden beskyttes mod høj varme, fugt og svære mekaniske stød.

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandsprøjt. Placér ikke containere eller flasker fyldt med vand, så som vaser, eller åben ild, som stearinlys på eller nær produktet.

Generelt

Miljøforhold

De generelle offentlige miljøbestemmelser om bortskaffelse af elektronik m.m.

Specifikationer

Der henvises til den originale brugervejledning.

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationerret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationerretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler

